

PROFILASSI PARODONTOLOGIA ENDODONZIA



NEUTRON

Salvaguarda i denti
con vibrazioni
perfettamente
controllate e punte
di qualità



TRATTAMENTI IN

La Tecnologia NEWTRON®, una garanzia di efficacia e sicurezza

I generatori della gamma NEWTRON® sono dotati della **tecnologia esclusiva e brevettata NEWTRON®**, che conferisce ai trattamenti una maggiore salvaguardia, efficacia e comfort.

W SALVAGUARDIA	
▶ Vibrazioni controllate	→ Trattamenti precisi che rispettano i tessuti
▶ Punte di qualità	→ Salvaguardia dell'anatomia e dello smalto
▶ Irrigazione controllata	→ Nessun riscaldamento = maggior sicurezza per i tessuti
W EFFICACIA	
▶ Frequenza adattata	→ Efficienza massima e continua con qualsiasi carico applicato
▶ Potenza regolata	→ Prestazioni costanti, non è necessaria alcuna pressione
▶ Cavitazione potente	→ Frammentazione e eliminazione di depositi, effetto di pulizia e disinfezione
W COMFORT	
▶ Vibrazioni lineari e regolari	→ Conservazione della sensibilità tattile
	→ Minor sforzo per il professionista
	→ Trattamento meno doloroso per il paziente

TUTTA DELICATEZZA



NEUTRON
TECHNOLOGY



CURARE METICOLOSAMENTE

NEWTRON
P5XS B. LED



NEWTRON® P5XS B.LED
Versatile e autonomo

NEWTRON® P5XS B.LED Bluetooth
Innovativo e intuitivo

NEWTRON
BOOSTER

NEWTRON® BOOSTER
Compatto e efficiente



E IN SICUREZZA

Pulire efficacemente salvaguardando i denti è una delle preoccupazioni principali di dentisti e igienisti dentali in tutto il mondo.

Le tecnologie brevettate dei nostri generatori della gamma NEWTRON®, combinate con la qualità delle nostre punte, vi accompagnano ogni giorno con la **promessa della miglior cura possibile** per i pazienti.

NEWTRON
P5 B. LED



NEWTRON® P5 B.LED
Design e ergonomia

INNOVAZIONE ACTEON®: NEWTRON LED

ACTEON è il primo produttore a proporre manipoli autoclavabili con luce LED integrata. NEWTRON LED illumina la zona operatoria tramite una luce fredda (35 000 lux) a 360°.



QUALITÀ DELLE PUNTE

La durezza delle punte NEWTRON®, progettate con un acciaio di qualità, si avvicina il più possibile a quella dello smalto.

Con le nostre punte e il loro spostamento lineare, i denti non sono solo curati, ma anche salvaguardati.



1
Detartrasi sopragengivale
• Punta universale
• Orientamento tangente alla superficie del dente



Detartrasi sopragengivale con la punta N. 1



1S
Detartrasi sottogengivale
• Adatta agli spazi interprossimali e alle tasche piccole



Detartrasi sottogengivale con la punta N. 1S



PV1
Tasche profonde
• Tasche > 4 mm



Debridement sottogengivale con un inserto PV1 inserito nella tasca parodontale




Più di 80 punte e sonde gatto e cane sono disponibili.
Richiedete la nostra documentazione

LA NORMA

Kit EndoVet

Il kit EndoVet serve a semplificare il protocollo di obturazione del canale radicolare. Esso permette di realizzare un'irrigazione passiva degli ultrasuoni grazie alla lima Irrisafe 25-45; una termocompattazione laterale grazie a calcatori di tipo condensatore SPR 30, 60 e 80, e una termocompattazione verticale tramite ultrasuoni grazie a calcatori di tipo compattatore PLU 60, 90 e 110.

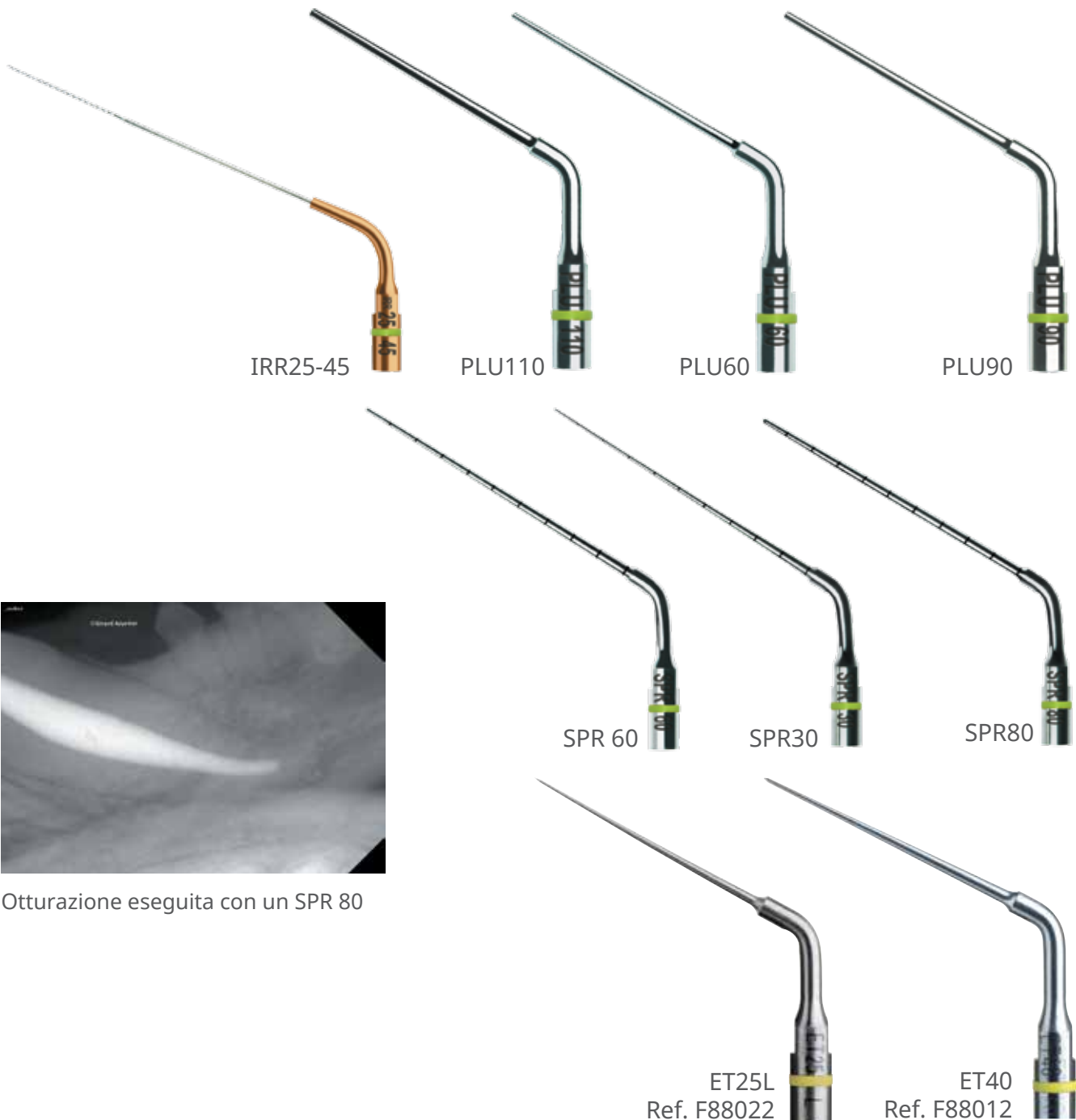

Otturazione eseguita con un SPR 80



PER RISPONDERE

Punte di alta gamma per trattamenti accurati e di qualità

- ▶ La più **vasta gamma** sul mercato, con circa 80 punte diverse, con design, leghe e rivestimenti esclusivi per una maggiore versatilità clinica.
- ▶ Anteprema mondiale: punte in **puro titanio** per la pulizia degli impianti.

Profilassi



Endodonzia



Endodonzia chirurgica



Parodontologia



- ▶ Molto imitate, mai eguagliate, ognuna delle nostre punte è ideata per vibrare con un unico modo fondamentale di risonanza, che assicura **un'efficienza massima e continua**.

A TUTTE LE CLINICHE

Sistema di irrigazione esterna ottimizzato

- ▶ I serbatoi graduati da 300 ml o 500 ml permettono la miscelazione delle soluzioni e il riempimento durante gli interventi.
- ▶ La regolazione semplice e precisa dell'irrigazione garantisce una cavitazione più potente e una **massima efficienza delle punte** (frammentazione dei depositi, effetto disinfettante).
- ▶ **Ogni tipo di soluzione irrigante** può essere utilizzata, inclusi acqua, ipoclorito e clorexidina.





NEUTRON
PS

ACTEON
BATELEC

DESIGN & ELEGANZA



Un design a servizio dell'ergonomia e dell'igiene

- ▶ Dispositivi eleganti: superfici piane in vetro, linee pulite, indicatore di potenza luminoso.
- ▶ Adattato all'uso: pannello frontale inclinato a 45° per una migliore interazione con il professionista e accessibilità alle impostazioni e al manipolo.
- ▶ Risponde alle necessità di igiene: impermeabilità completa, regolazione della potenza amovibile per una pulizia semplice.

Manipolo NEWTRON® SLIM sottile e bilanciato

- ▶ Forma ergonomica per qualsiasi posizione dell'impugnatura, con cavo flessibile.
- ▶ Interno in Titanio per una resistenza estrema alla corrosione.
- ▶ B.LED: rivelazione della placca dentale e eccellente visibilità intraorale (2 anelli LED, bianco e blu, intercambiabili e autoclavabili, con 6 LED ad alta potenza).

Esclusivi supporti per il manipolo per prevenirne la caduta

Installati sulla parte anteriore o laterale dei dispositivi, i supporti in silicone sono amovibili e autoclavabili.



COCOON® HYGIENIST LED

Combinazione Motore / Generatore a ultrasuoni

- Spray integrato, motore, manopola e siringa
- Diverse applicazioni:
 - Profilassi
 - Odontoiatria di restauro
 - Ortodonzia
 - Splintaggio dentale in traumatologia.
 - Endodonzia



AIR N GO EASY

Semplificate tutte le vostre operazioni cliniche con la levigatrice ad aria tutto in uno

ACTEON® EQUIPMENT crea la nuova generazione di levigatrici ad aria portatili a doppia funzione per:

- ➔ "Funzione SUPRA" per la levigatura sopragengivale: cure quotidiane di profilassi.
 - ➔ "Funzione PERIO" per la levigatura sottogengivale: manutenzione, trattamenti parodontali e periimplantari.
- Questo dispositivo medico unisce semplicità e prestazioni.



MORE INVENTIVE
LESS INVASIVE*

ACTEON® fa leva su due tecnologie ad alto valore aggiunto, per cui possiamo rivendicare una leadership mondiale: gli ultrasuoni di potenza e l'imaging medico digitale. La nostra rete è composta da team tecnici e commerciali perfettamente formati, distribuiti in 26 uffici a livello internazionale e una rete di distribuzione che completa la copertura dei nostri mercati in altri 94 paesi. ACTEON® si impegna per rafforzare il legame tra la medicina umana e veterinaria, in particolare nell'ambito dentale, avendo come obiettivo il miglioramento della qualità delle cure prodigate agli animali.