

OTOSCOPIA VETERINARIA PER PICCOLI ANIMALI

Le malattie dell'orecchio esterno e medio sono problemi comuni in cani e gatti. L'otoscopio grazie alla forma conica e alla lunghezza specifica, può essere utilizzato anche nelle razze canine con canale uditivo lungo.




La visione di alta qualità consente una valutazione precisa del trattamento da applicare e l'esecuzione di interventi a bassa traumaticità. Principali utilizzi: lavaggi e drenaggi, miringotomie, rimozione corpi estranei, curettage di orecchie infiammate, trattamenti vari dell'orecchio esterno, campionamenti e biopsie.

Il canale di lavoro e i due ingressi con rubinetti permettono l'uso di strumenti, di pinze flessibili da presa e biopsia, di cateteri e l'esecuzione di lavaggi e drenaggi. La fonte di luce a manico ne permette un utilizzo anche ambulatoriale



Otoscopio \varnothing 5,5mm, 0°, 9cm

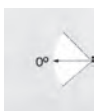

EM115 Otoscopio rigido, Angolo 0°
Diametro 5,5 mm, lunghezza operativa 9cm. Canale di Servizio.
Vetro zaffiro antigraffio

Pinze flessibili da presa e da biopsia, Ø 5FR, 28cm

Il meccanismo Hands Free permette la chiusura delle ganasce automaticamente, mantenendo la presa anche senza l'ausilio della mano del chirurgo.



EM75150280 Pinza da biopsia

Flessibile, Ø 5Fr., 280cm.

Con sistema di chiusura automatico Hands Free

Autoclavabile

EM75150280 Pinza da Presa

Flessibile, Ø 5Fr., 280cm.

Con sistema di chiusura automatico Hands Free

Autoclavabile

Fonte di Luce Portatile



VM100 Fonte di luce LED portatile

- 10W, 3 regolazioni di intensità
- Specifica per Endoscopia Rigida
- Compatibile con tutti i principali endoscopi
- Fornito con batteria ricaricabile, caricabatteria e borsetta

EM115-2R Blocco rubinetti con 2 ingressi

